



fi MEDICAL[®]

OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA



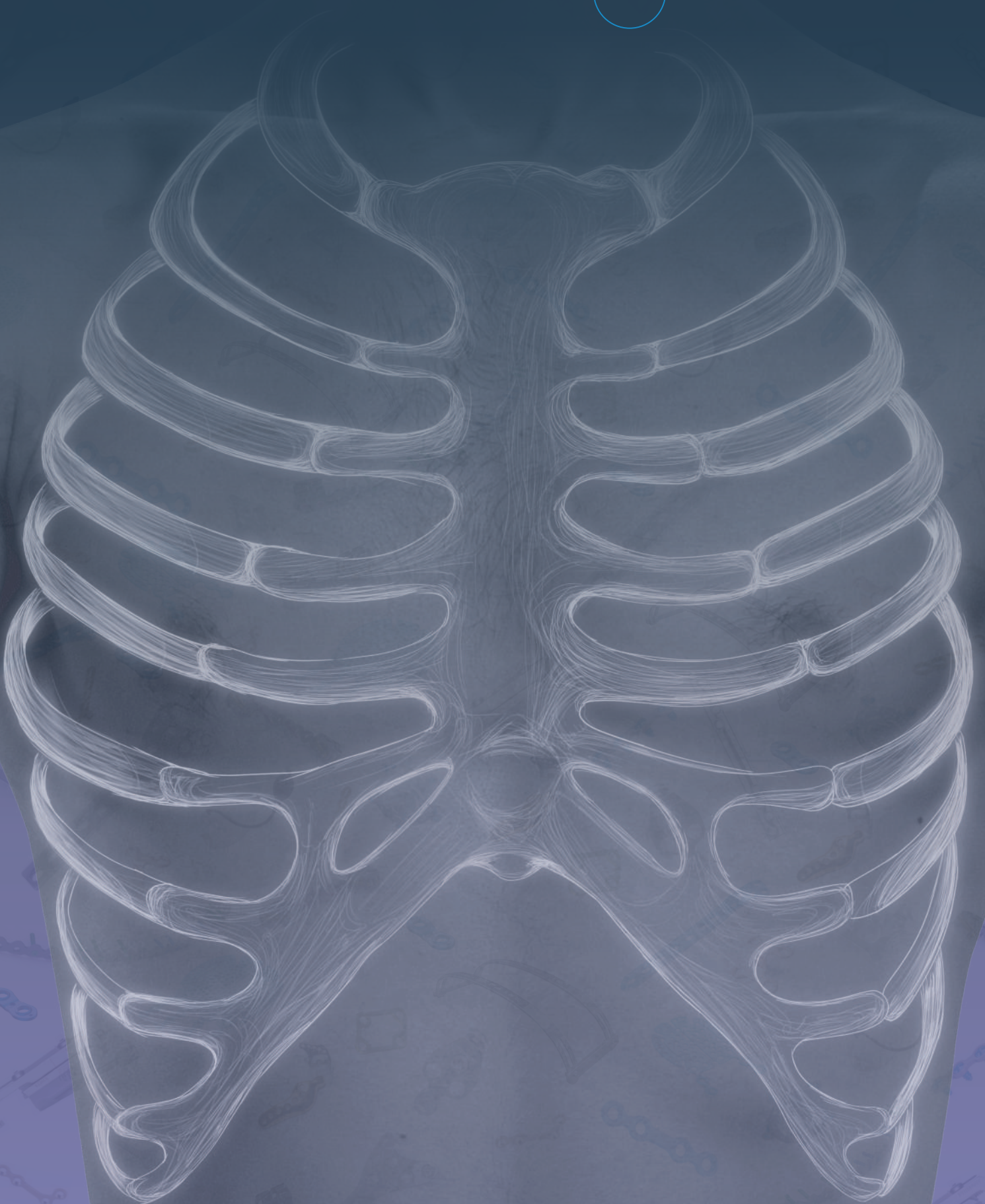

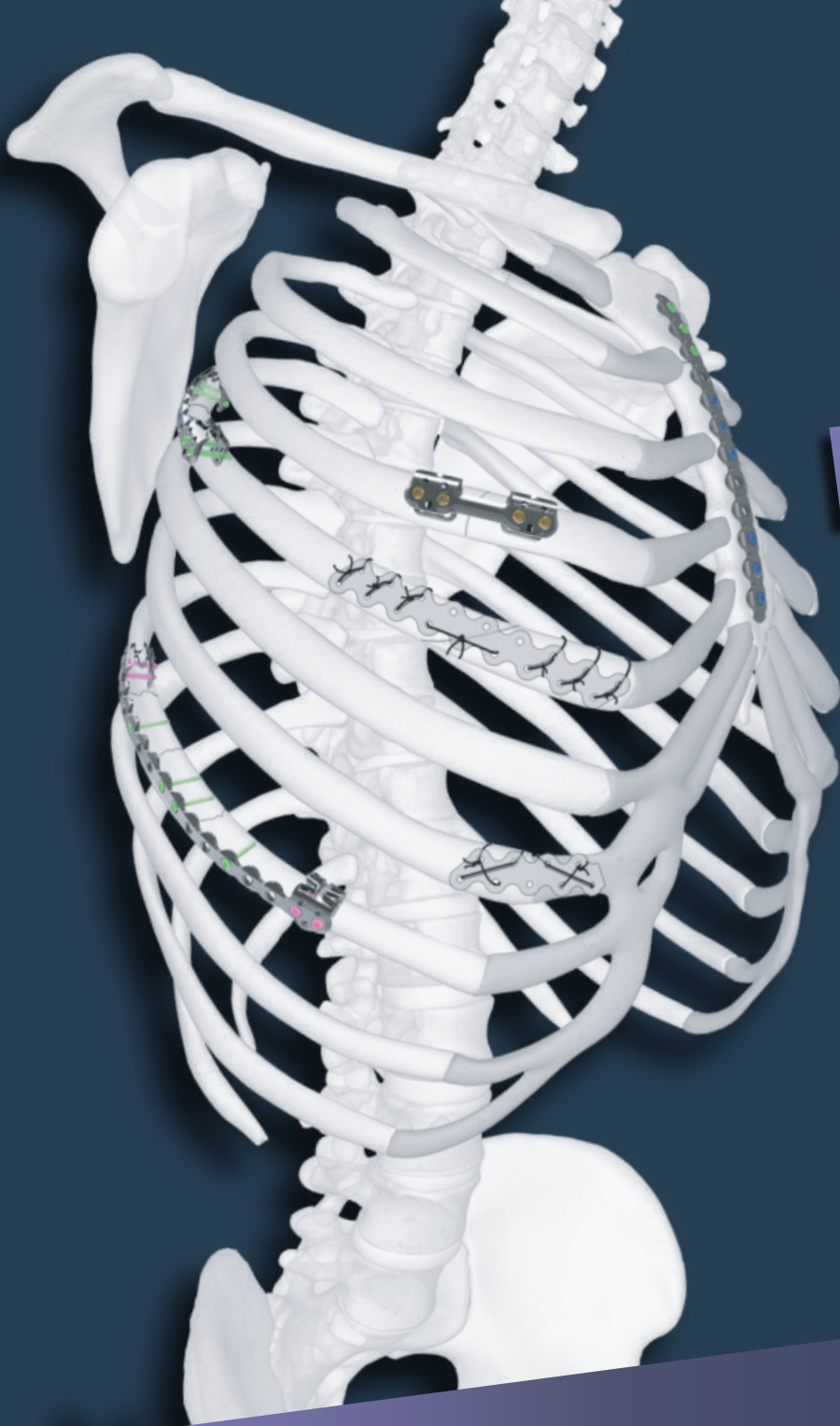

PECTUS EXCAVATUM 3D




SISTEMA FIXRIBS



GRUA PECTUS


NUEVOS PRODUCTOS

PLACA ABSORBIBLE

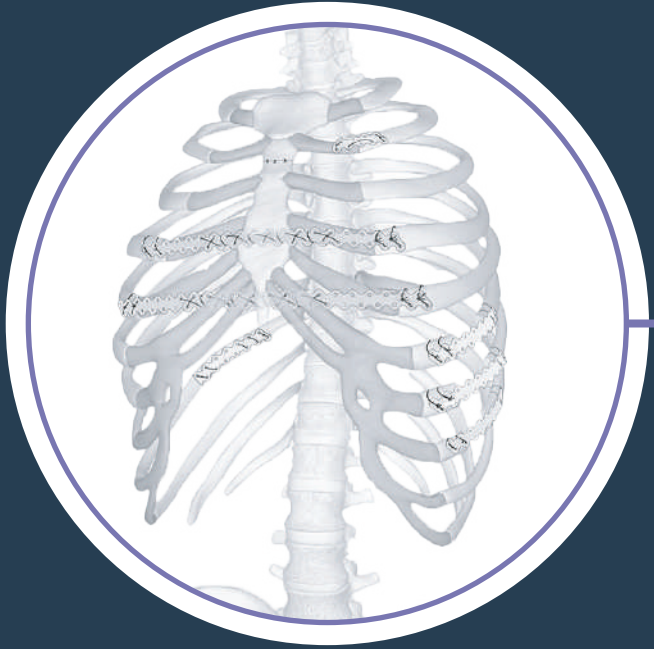


FIJACIÓN de osteotomías, reconstrucción, fracturas de la reja costal y la **CORRECCIÓN** de pectus excavatum a través de la **TECNICA RAVITCH**


- Materia prima de ácido **POLI-L-LÁCTICO** (Mezcla de 70%-30%).
- Estéril y empacado individualmente.
- Estabilidad hasta por 6 meses.
- Placa moldeable.
- Absorción de 18 a 24 meses.
- Únicos en Colombia.

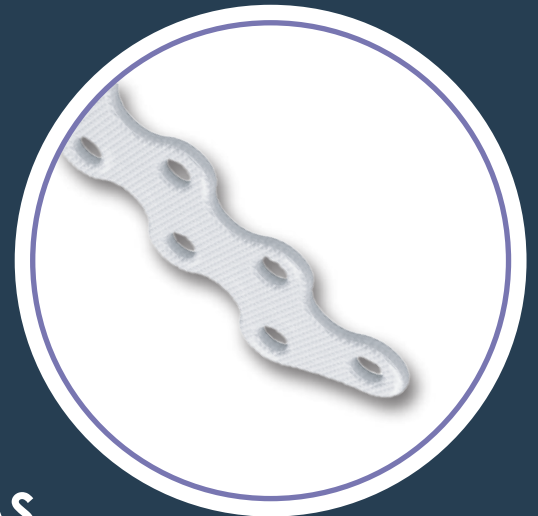

MEDIDAS

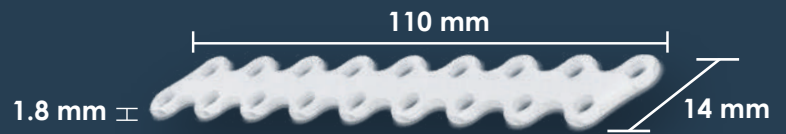

APILABLE

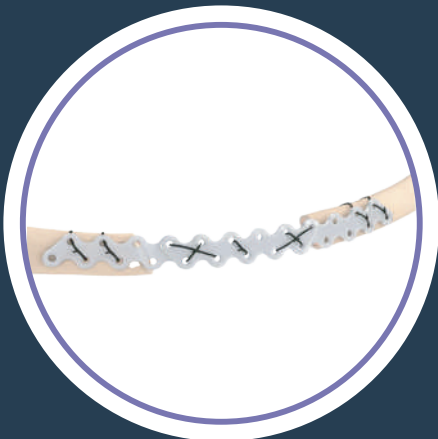

FLEXIBLE



AJUSTABLE



SISTEMA FIXRIBS

Está indicado para la

FIJACIÓN y ESTABILIZACIÓN

de fracturas, fusiones y osteotomías de la reja costal




- Placas en clip y placas de reconstrucción rectas y curvas.
- Estabilización rápida y segura.
- Preservación del periostio a través de su diseño.
- Las placas de clip permiten la fijación en el cartílago costal.
- Placas fabricadas en titanio para brindar flexibilidad y resistencia.

PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN

RECTA

ORIFICIOS
8

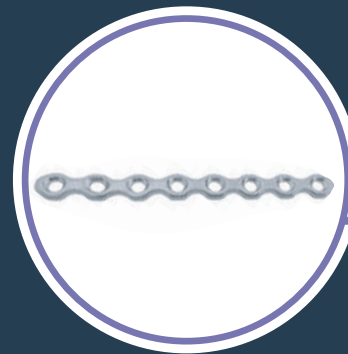

CURVA

ORIFICIOS
8, 15, 16, 17 y 18

LATERALIDAD
Derecha
Izquierda



PLACAS EN CLIP



LONGITUD
55 mm a 56 mm

ANCHO
15 mm a 19 mm

ALTURA
10 mm a 12 mm



TORNILLO DE BLOQUEO




SISTEMA
3,0 mm

LONGITUD
6, 8, 10, 12 y 14 mm


SISTEMA PECTUS PARK

Técnica **SENCILLA**
y **SEGURA** para la corrección
del pectus, con implantes
MÍNIMAMENTE invasivos
para moldear una deformidad
torácica

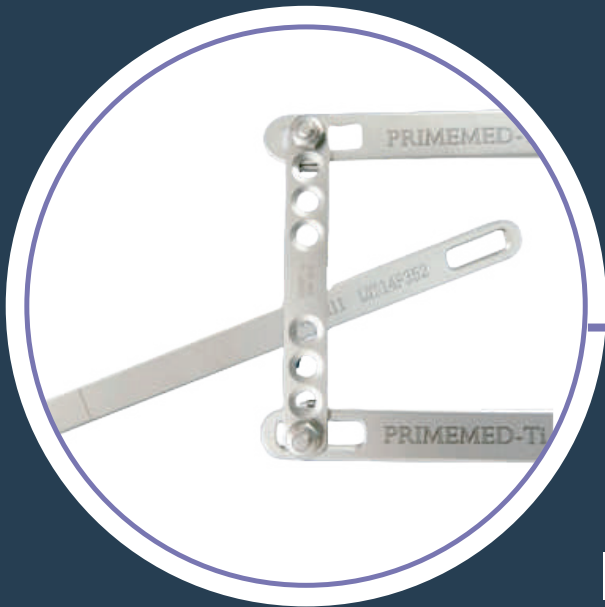

IMPLANTES


- Barras de titanio y acero inoxidable.
- Estabilización rápida y segura.
- Dispositivos únicos y especiales.
- Barras con extremos redondeados y lisos que evita el daño de los tejidos blandos.
- Menor tiempo quirúrgico.
- Mínima pérdida de sangre.
- Recuperación rápida.

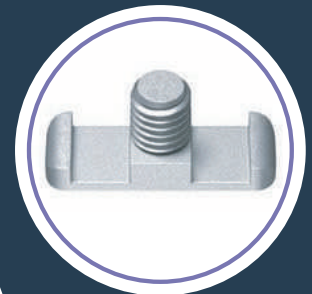

CLIP




GANCHO

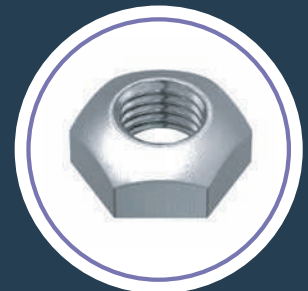


TUERCA

ESTABILIZADORES

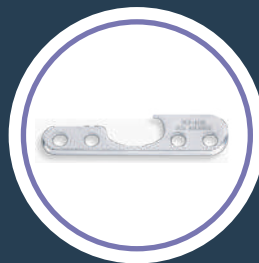

PLACA
BISAGRA

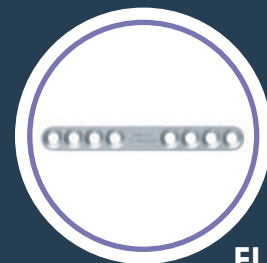

FIJADOR
PUENTE

EXTREMO
REDONDEADO




BARRA DE PECTUS
MODIFICADA

PARK'S PECTUS SYSTEM


NUEVO

ESTABILIZACIÓN DE LA BARRA DE PECTUS

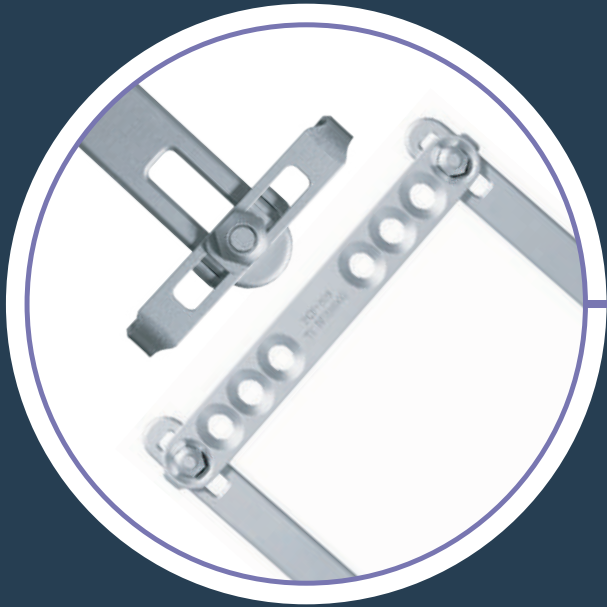


EVITA la **SOBRECORRECCIÓN** y el **DESPLAZAMIENTO** de la barra con una excelente estabilidad

TIPO PUENTE

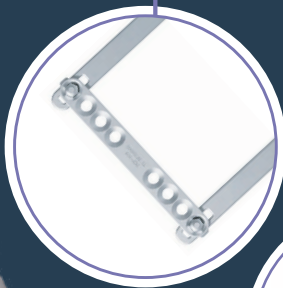

ESTABILIZADORES

FIJADORES

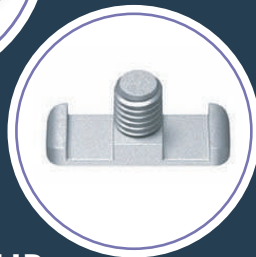


CLIP



GANCHO

TIPO GANCHO

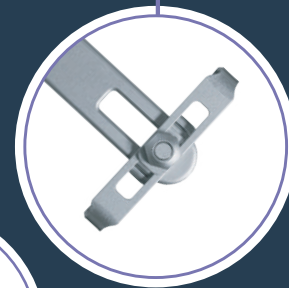


TÉCNICAS DE CORRECCIÓN




UNA SOLA BARRA



BARRA MÚLTIPLE

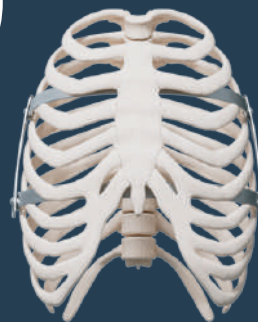

BARRAS XI

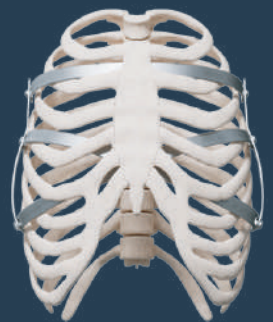

PARK'S PECTUS SYSTEM


NUEVO

SISTEMA DE GRUA

FACILITA la posición del **ESTERNÓN** durante la cirugía, su elevador **AYUDA** al desplazamiento de la barra dando una **EXCELENTE ESTABILIDAD**



PERILLA
NIVELADORA

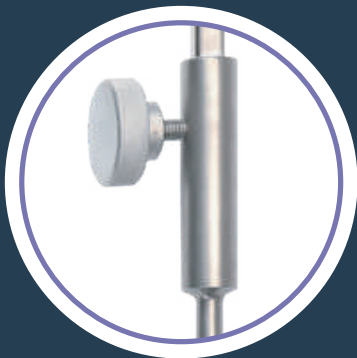


NIVELADOR



ELEVADOR



GANCHO

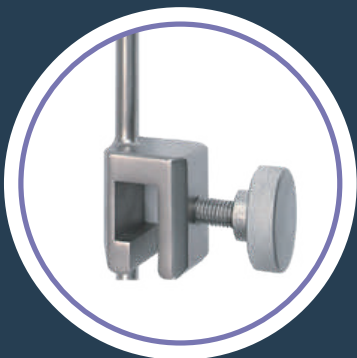


SUJETADOR



PECTUS EXCAVATUM

NUEVO

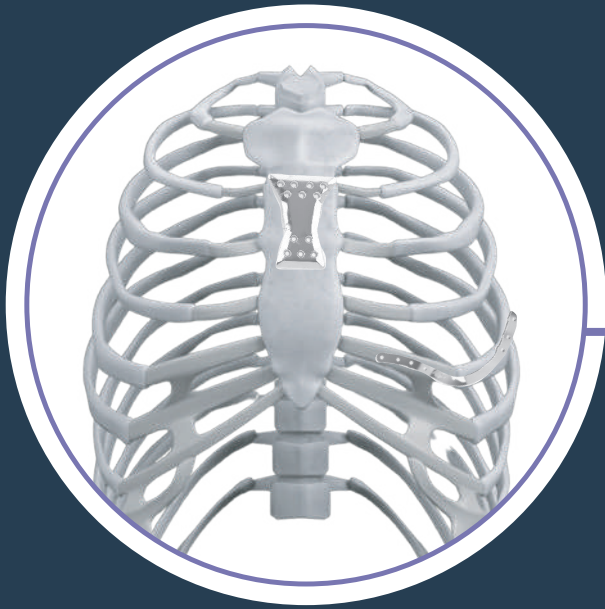


PECTUS EXCAVATUM Y PLACAS DE CORRECCIÓN A MEDIDA

DISEÑO y FABRICACIÓN de implantes a **MEDIDA** en múltiples tecnologías aptas para el uso quirúrgico e implantes

- Adaptación a medida de la fabricación en función de la prioridad del paciente.
- Planificación 3D telemática para establecer las directrices de la intervención.
- Implantes biomédicos de alta calidad.
- Placas de reconstrucción con **MICROFRESADO**.
- Manufactura aditiva de titanio y poliamida certificada para uso médico.
- Adaptado a cualquier sistema o suministro de tornillería.

PLANIFICACIÓN 3D

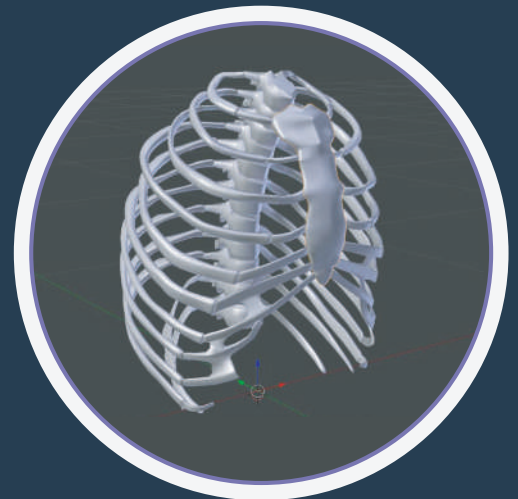

OSTEOTOMÍA GUIADA DE PECTUS EXCAVATUM A MEDIDA

PLACA DE FIJACIÓN MÚLTIPLE A MEDIDA





BARRA PECTUS



RIBLOC U PLUS



CIERRE ESTERNAL

NUESTROS PRODUCTOS

BARRA DE PECTUS

SISTEMA DE CORRECCIÓN BARRA PECTUS



CORRECTOR de pectus excavatum y carinatum a través de una **REPARACIÓN** mínimamente **INVASIVA**

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Extremos redondeados.
- Bordes romos.
- 12 Muecas en cada extremo y un orificio.




LONGITUDES

Desde 18 cm

Hasta 45.5 cm

(Incrementos de 2.5 cm)

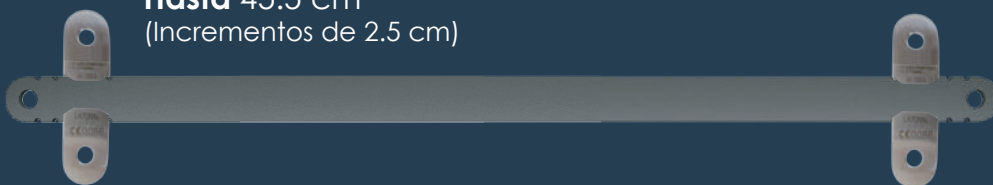

ESTABILIZADORES



TORNILLO
DE
FIJACIÓN

CORTO



LARGO




CARINATUM

(Con tornillos de fijación)



RIBLOC U PLUS

SISTEMA DE PLACAS PARA PARED TORÁCICA

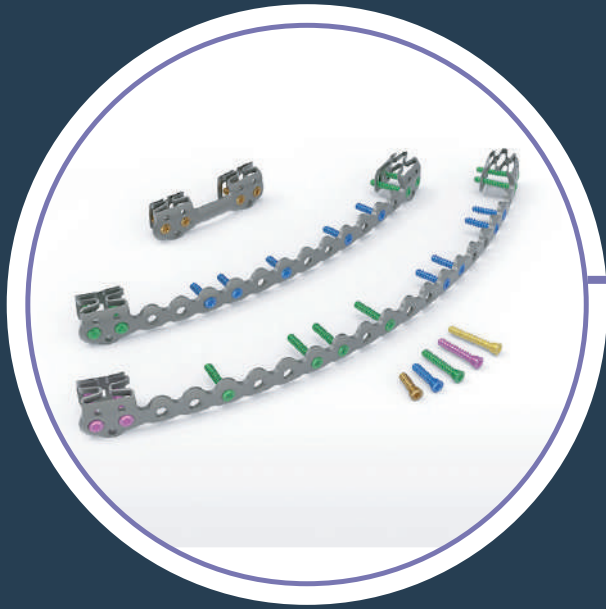

Diseñado para **ESTABILIZAR** y proporcionar **FIJACIÓN** para fracturas, fusiones osteotomías y **RECONSTRUCCIÓN** de la reja costal y el esternón


- Sistema de fijación bicortical bloqueado.
- Diseño en forma de U comprimible que ayuda a la conservación del VAN.
- Placas adaptables al espesor de la costilla de cada paciente.
- Permite abordar una amplia gama de patrones de fractura.

LONGITUD
50, 75, 115, 155, 215 y 216 mm




INSTRUMENTAL VERSÁTIL, FÁCIL Y SEGURO

GUÍA INTERMEDIO

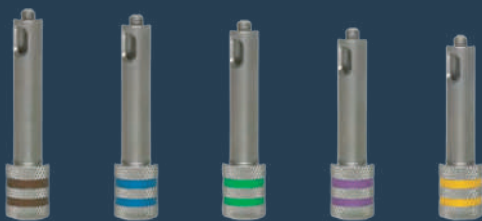

LONGITUD
6, 8, 10, 12 y 14 mm

GUÍA PRIMARIA

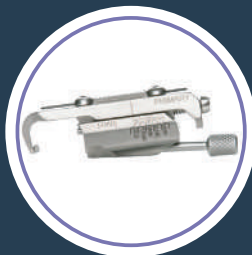


TORNILLOS BLOQUEADOS CODIFICADOS POR COLORES



LONGITUD
6, 8, 10, 12 y 14 mm



MEDIDOR INTERMEDIO

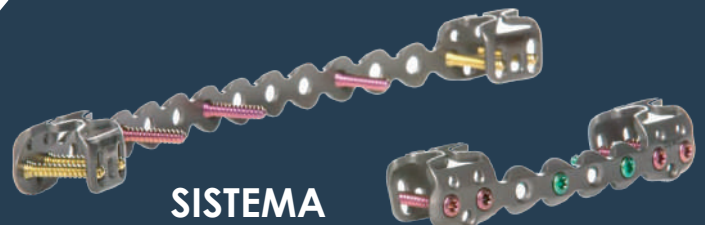


SISTEMA
2.7 mm

CIERRE ESTERNAL

SISTEMA DE PLACAS PARA CIERRE ESTERNAL

Diseñado para **ESTABILIZAR** y proporcionar **FIJACIÓN** para fracturas, traumatismos, fusiones, osteotomías y **RECONSTRUCCIÓN** del esternón

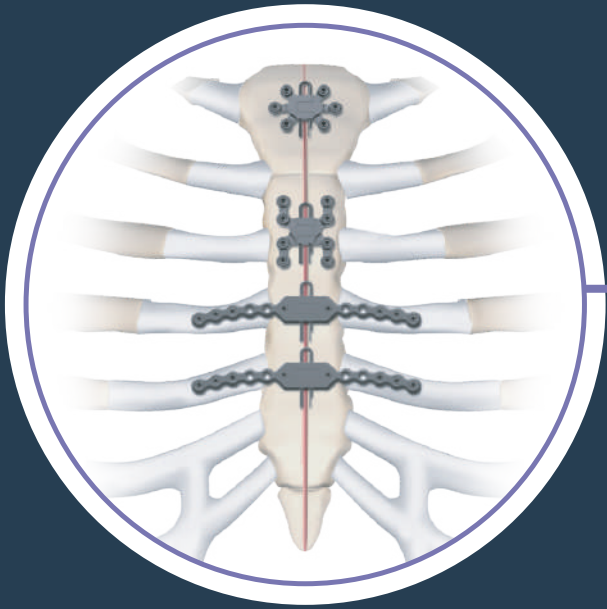

- Permite una reducción anatómica y estable.
- Material en titanio.
- Bloqueo seguro y estable.
- Pasador de liberación de emergencia en todas las placas.
- Tornillos autorroscantes esponjosos de bloqueo.
- Amplia variedad de placas esternales (Rectas, en forma de estrella y en forma de H).

PASADOR DE EMERGENCIA




TORNILLOS BLOQUEADOS Y ESPONJOSOS

LONGITUD
10, 12, 14, 16,
18, 20 y 22 mm

SISTEMA
2.7 mm



RECTA PARA BLOQUEO DE COSTILLA ESTERNÓN COSTILLA

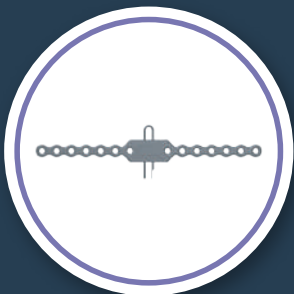

ORIFICIOS
12, 20 y 30

PLACAS

H



ORIFICIOS
8
(En Small y en Long)

ESTRELLA



ORIFICIOS
6


ESTRELLA



ORIFICIOS
12


CAMPANA ECKART KLOB

CAMPANA DE VACÍO PARA PECTUS EXCAVATUM

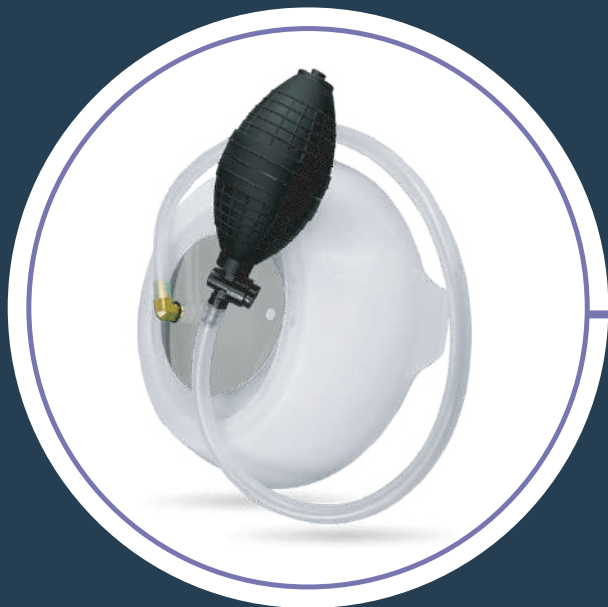

Sistema de **VACÍO ECKART KLOBE** indicado para la **CORRECCIÓN** pectus excavatum

- Actúa mientras el paciente desarrolla sus actividades diarias.
- Viene con dos "bombas" de recambio.
- Eleva la caja torácica por depresión.
- Tratamiento no quirúrgico.
- No invasivo.
- Disponibilidad para alquiler y venta.
- Viene con medidor de vacío.
- Aplicable hasta la mediana edad.

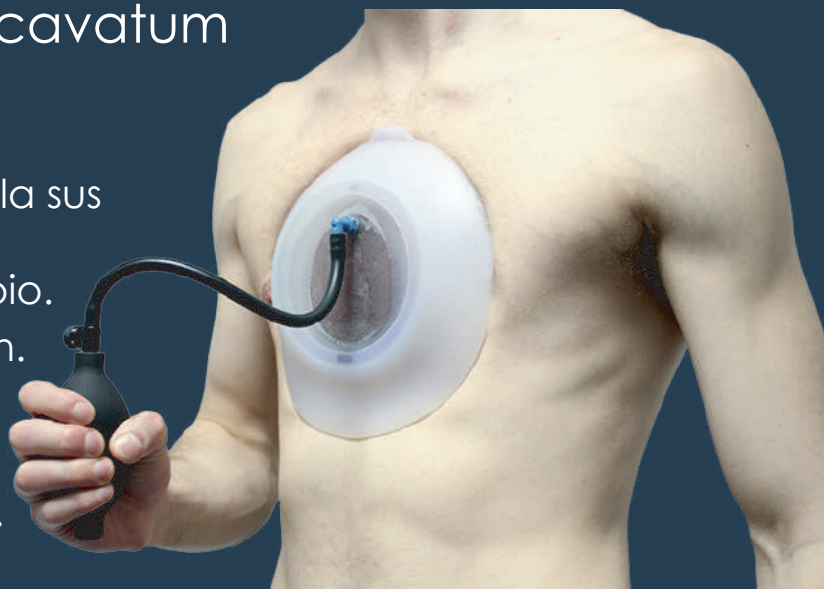

VENTOSAS



PERA DE SUCCIÓN



CONEXIÓN ROSCADA



VÁLVULA EN T




MINI
16 cm



PEQUEÑA
19 cm




MUJER
19 cm

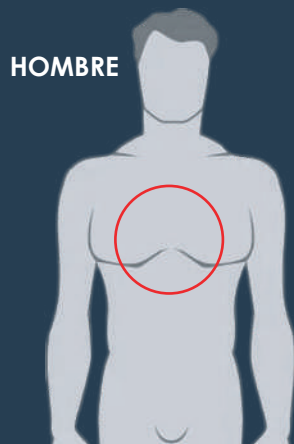

HOMBRE



NIÑOS

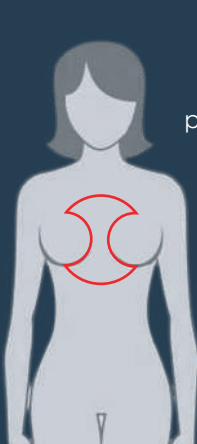

MUJER
(Protección para los senos)




BODYBUILDER
19 cm



GRANDE
26 cm



VISITA NUESTRAS OTRAS LÍNEAS

fi  CMF 

CUSTOMfi  

fi  PIEZO 

BONEfi  

fi  TÓRAX 

fi  REGENERERA 

fi  MED2GO 



fixMEDICAL[®]

OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA



www.fixmedical.com

 @fixmedical_col

 Fixmedical

 (+57) 318 372 2814



SOCIEDADES

BIC

Empresas con propósito